

Серия HyPort

Блок для подачи медицинского оборудования

Материалы и информация, содержащиеся в этой брошюре, распространяются в различных государствах, но не все указанные здесь изделия или услуги обязательно доступны в вашей стране или регионе. За справками о наличии соответствующих изделий или услуг обращайтесь в местные офисы или к представителям компании.



mindray

Серия HyPort

Блок для подачи медицинского оборудования

mindray
healthcare within reach




Развитие медицинских технологий привело к оснащению операционных и отделений интенсивной терапии мощными устройствами. Чтобы извлечь из них максимум ради повышения эффективности рабочего процесса и, в конечном счете, принести пользу пациентам, профессионалы нуждаются в решении, которое может оптимально организовать все устройства.

Подвес для подачи медицинского оборудования серии HyPort улучшает доступ к пациенту, повышает клиническую эффективность и обслуживание пациента, поднимая оборудование над полом, объединяя его выходы и размещая его в нужных местах. Модульная конструкция обеспечивает максимальную гибкость в различных пространствах, эргономичный дизайн требует от медсестер меньше усилий для быстрого и точного позиционирования, а цветовая гамма позволяет поддерживать гармоничную медицинскую обстановку, как для медработников, так и для пациентов.

- **Максимальная гибкость**
- **Великолепные рабочие характеристики**
- **Высшее качество**
- **Заказной дизайн**

HyPort 3000

Подвес для подачи медицинского оборудования

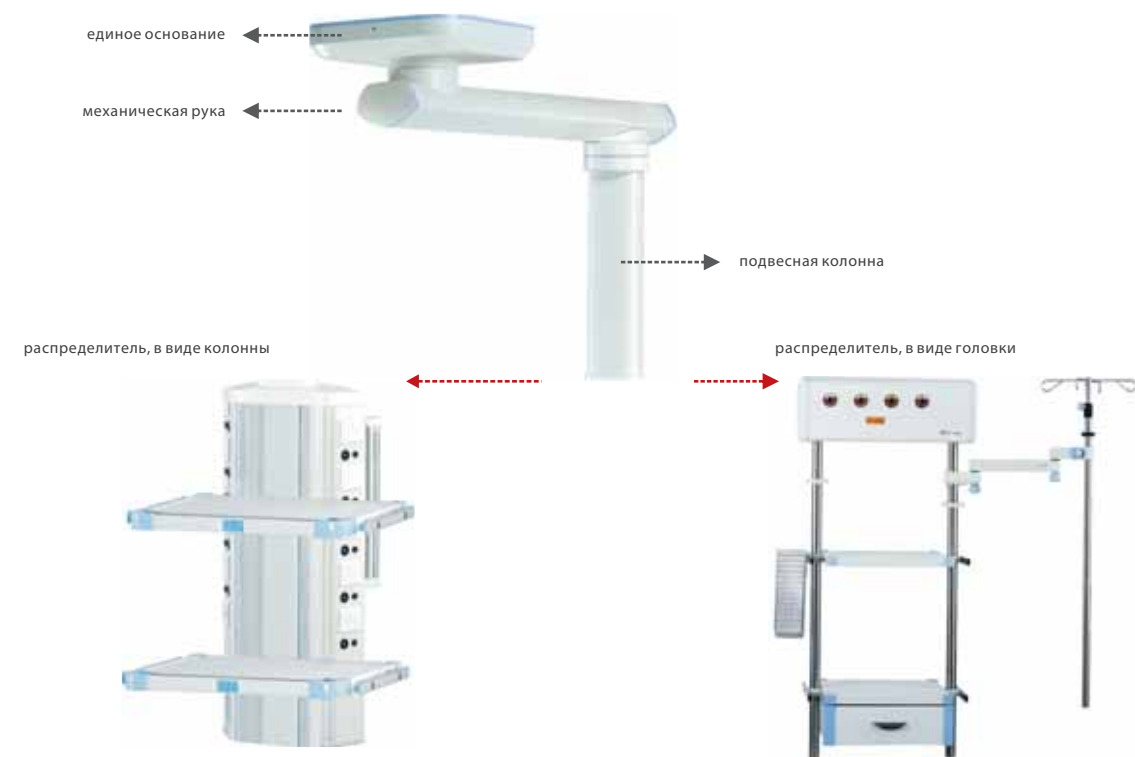


HyPort 3000 — это механический подвес, снабженный механическими руками.

Механическая рука поворачивается вручную по горизонтали на 340°. Грузоподъемность меняется в зависимости от различных длин и грузоподъемности механических рук — малой, средней и большой.

HyPort 6000

Подвес для подачи медицинского оборудования

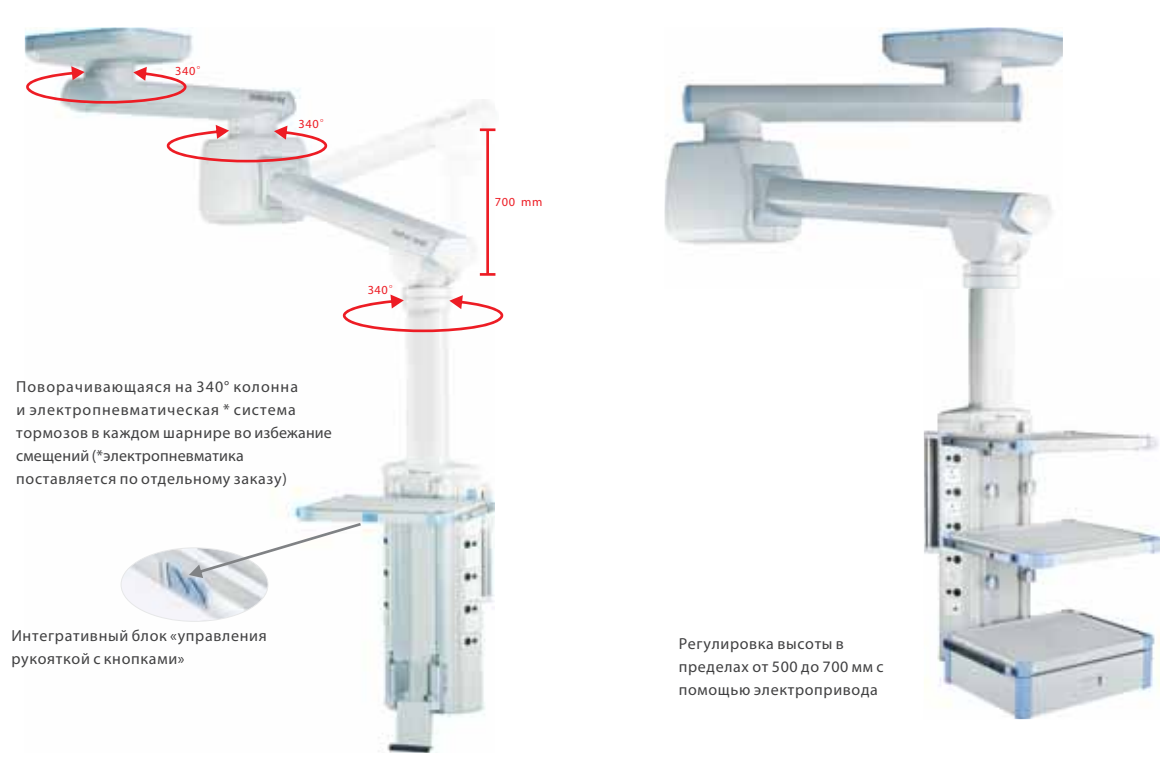

HyPort 6000 — это моторизованный подвес, снабженный моторизованными руками.

Моторизованная рука может автоматически поворачиваться электродвигателем для регулировки высоты распределителя, а также может поворачиваться вручную по горизонтали на 340°. Поэтому HyPort 6000 может поднимать наркозный аппарат или тележку для минимально инвазивной хирургии (Minimally Invasive Surgery — MIS) над полом. Грузоподъемность — 220 кг.



Предупреждающая столкновения конструкция углов полки защищает медицинский персонал и оборудование от неожиданного столкновения.



Высота полок и выдвижных ящиков регулируется в соответствии с различными высотами хирургических устройств.



Монтируемый на перилах кабельный органайзер замечательно управляется с длинными кабелями.



Конструкция с отдельными отсеками для газовых патрубков и электрических розеток значительно повышает безопасность.



Универсальная система подвеса подходит для различных наркозных аппаратов и тележек для минимально инвазивной хирургии.



Подвес HyPort оборудован модульным распределителем, гарантирующим упорядоченное расположение газовых и электрических выходов по разные стороны для безопасности и надежности.



Удобная для пользователя маркировка, способствующая безопасной эксплуатации оборудования и управлению им.



Встроенный в полочную конструкцию интегративный блок «управления рукояткой с кнопками» для регулировки высоты и электропневматическая система тормозов, обеспечивающая регулировку в пределах от 500 до 700 мм.


Серия HyPort

Блок для подачи медицинского оборудования



Заказной дизайн

- Благодаря индивидуально подобранным длинам механических рук, HyPort вписывается в операционную или ОИТ любого размера и обеспечивает эффективное распоряжение пространством и оборудованием.
- Широкий выбор принадлежностей поддерживает различные медицинские приложения.
- AUTOCAD и трехкоординатное проектирование обеспечивают оптимальные конфигурации для клиентов.

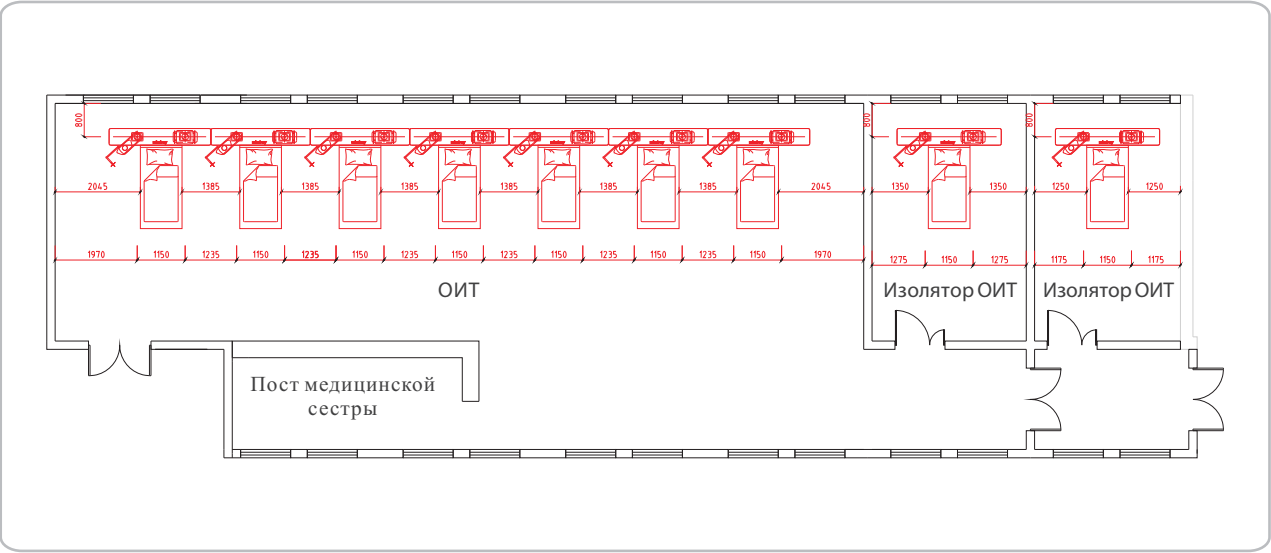

Технические данные HyPort 3000

Длина руки Максимальная грузоподъемность Тип руки	Одинарная рука				Двойная рука						
	500 мм	750 мм	1 000 мм	1 250 мм	500+500 мм (1 000 мм)	750+500 мм (1 250 мм)	750+750 мм (1 500 мм)	1 000+750 мм (1 750 мм)	1 000+1 000 мм (2 000 мм)	1 250+1 000 мм (2 250 мм)	1 250+1 250 мм (2 500 мм)
Механическая рука малой грузоподъемности	300 кг	240 кг	200 кг	160 кг	190 кг	170 кг	140 кг	120 кг	110 кг	100 кг	90 кг
Механическая рука средней грузоподъемности	460 кг	400 кг	320 кг	260 кг	270 кг	230 кг	200 кг	180 кг	160 кг	140 кг	120 кг
Механическая рука большой грузоподъемности	680 кг	550 кг	420 кг	340 кг	400 кг	380 кг	350 кг	310 кг	270 кг	240 кг	210 кг

Тип распределителя	Версия головки		Версия колонны			
Длина распределителя	600 мм	700 мм	500 мм	800 мм	1 000 мм	1 250 мм
Размер полки	450×350 мм	550×350 мм, 650×350 мм		450×500 мм		

HyPort 6000

Длина руки Максимальная грузоподъемность Тип руки	Одинарная механическая рука (моторизованная рука средней грузоподъемности)		Двойная рука(механическая рука средней грузоподъемности+моторизованная рука средней грузоподъемности)							
	750 мм	1 000 мм	500+750 мм (1 250 мм)	500+1 000 мм (1 500 мм)	750+750 мм (1 500 мм)	750+1 000 мм (1 750 мм)	1 000+750 мм (1 750 мм)	1 000+1 000 мм (2 000 мм)	1 250+750 мм (2 000 мм)	1 250+1 000 мм (2 250 мм)
Моторизованная рука средней грузоподъемности	220 кг	180 кг	220 кг	180 кг	220 кг	180 кг	180 кг	180 кг	180 кг	180 кг

Тип распределителя	Версия головки		Версия колонны			
Длина распределителя	600 мм	700 мм	500 мм	800 мм	1 000 мм	1 250 мм
Размер полки	450×350 мм	550×350 мм, 650×350 мм		450×500 мм		

Комплексные решения для операционной от компании — добро пожаловать в выставочный зал компании Mindray!

Все передовые и надежные средства на основе технологии компании Mindray прекрасно сочетаются друг с другом, обеспечивая полную поддержку!

