



2.0-6.8 МГц Конвексный датчик
D3C60L



2.0-8.0 МГц Фазированный датчик
D5P64L



2.0-6.8 МГц Объемный датчик
V4C40L



1.5-2.5 МГц Карандашный датчик
D2D16L



4.0-15.0 МГц Линейный датчик
D7L40L



4.0-6.0 МГц Чреспищеводный датчик
T5P64L



7.0-15.0 МГц Линейный датчик
D12L40L



4.0-6.0 МГц Чреспищеводный датчик
MT5P48L



4.0-15.0 МГц Линейный датчик
D8L50L(50mm)



4.0-12.0 МГц трансвагинальный датчик
D6C12L



4.0-15.0 МГц Линейный датчик
D7L40L(192)



4.0-15.0 МГц трансвагинальный датчик
D7C10L



4.0-10.7 МГц Интраоперационный
датчик: D10L30L



4.0-15.0 МГц Транс-Ректальный датчик
D7L40L-REC



1.0-5.3 МГц Фазированный датчик
D3P64L



2.0-6.8 МГц Микро-конвексный датчик
D3C20L



4.0-12.0 МГц Микро-конвексный датчик
D6C15L



QBIT 11

- Ультразвуковая система со сверхтонкой компактной сенсорной панелью, представляющая собой превосходный инструмент для оптимизации процесса и упрощения клинического скрининга.
- Система является объединением современных достижений в области разработки и модернизации аналоговичных систем, а также специализированного комплекса тщательно проработанных функций

10.1-дюймовая сенсорная HD панель

- Сверх чувствительный
- Настраиваемый интерфейс
- Эргономичное исполнение обеспечивает всестороннюю визуализацию под разными углами.



Интеллектуальный режим ожидания

- Интеллектуальное управление позволяет продлить время работы батареи
- Мгновенное включение питания

Встроенная батарея

21-дюймовый HD LED монитор, поворачивающийся на $\pm 90^\circ$



Инновационный энергосберегающий источник света

Адаптивная панель управления поворачивающаяся на $\pm 45^\circ$ с регулировкой по высоте (0-15 см)



Отдельно-выделенное место для видео-принтера




Полноценный набор:
Инновационное сервисное решение
Быстрый • Легкий • Надежный • Доступный




Стресс-эхо

- Помогает подтвердить или исключить заболевания коронарной артерии.
- Пациенты с закупорками коронарных артерий могут иметь минимальные симптомы во время отдыха или не иметь их вообще.
- Симптомы и признаки болезни сердца могут быть обнаружены путем воздействия стресса на сердце.

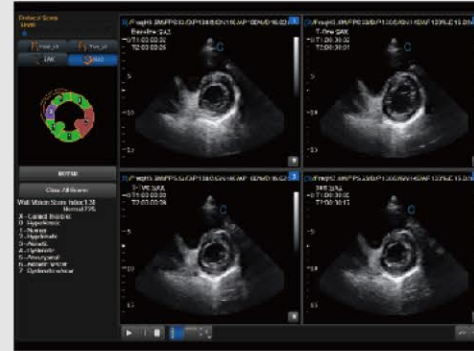


Количественная эластография

- Показывает эластичность различных тканей в разных цветах.
- Предоставляет больше клинической информации, особенно для мягких тканей.
- Измерение отношения деформаций дает количественное соотношение между средней деформацией выбранной области и соседней нормальной области ткани.

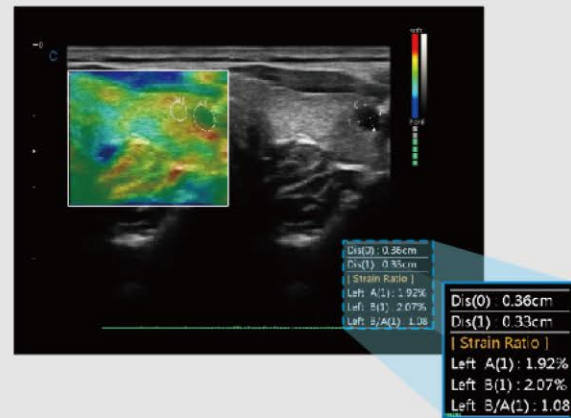

Автоматическое обследование молочной железы

- Автоматическое определение повреждений молочной железы.
- Указание размеров.
- Эффективен для диагностики.

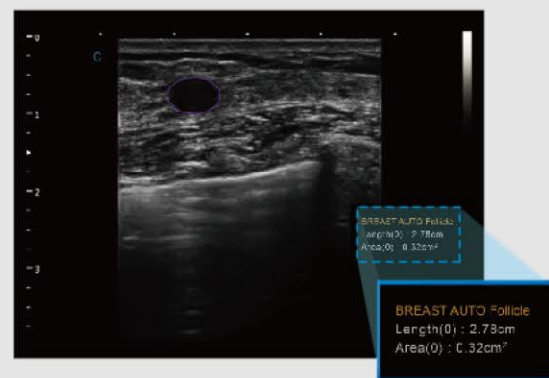

Умная HIP диагностика

- Использование кривых для диагностики тазобедренного сустава (особенно полезно при биопротезировании), помогает врачу осуществлять более легкую и точную диагностику во время педиатрического сканирования тазобедренного сустава.
- Разный угол указывает на разный уровень деформации тазобедренного сустава, который легче и понятнее видеть с помощью кривых. (I, II, D, IIIa, IIIb).

