

HOSPITAL



АППАРАТЫ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



АППАРАТЫ ИВЛ

ELISA 800 / ELISA 600


Универсальные аппараты ИВЛ с широким спектром возможностей, включающих нвазивные, неинвазивные и современные «гибридные» режимы вентиляции.

Основные преимущества:

- 18,5" сенсорный дисплей
- **24 режима вентиляции**, включая
Режим вентиляции при проведении СЛР
Режим вентиляции с закрытым контуром – ALPV
- **Гибридные режимы вентиляции**
VA BiLevel / Dynamic BiLevel / Dual BiLevel
Dynamic BiLevel ST / Dual BiLevel ST
Flexible BiLevel / Flexible VCV
- **Капнография** (опция)
- **Peso / Cuffscout** (опция)
Измерение транспульмонарного давления
Управление и мониторинг давления в манжете
- **HFOT** – высокопоточная оксигенотерапия
- Неинвазивная вентиляция



- **PEEPfinder**
Построение статической кривой давление-объем и проведение рекрутмента

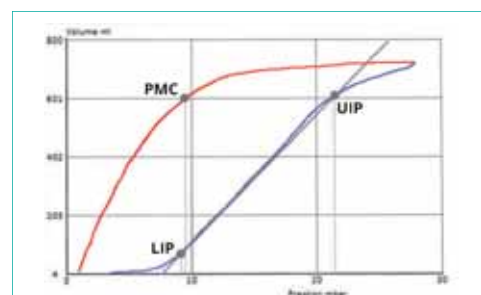

ELISA 800 / ELISA 600

Основные функции:

- **Помощь**
Подсказки по каждому режиму вентиляции, параметру или тревоге
- Автоматическое обнаружение пациента
- **Weaning analyzer**
Протокол отучения и скрининг состояния пациента с рекомендациями по дальнейшему ведению респираторной поддержки
- Мониторинг гигиены
Отображение и напоминание интервалов замены расходных материалов (дыхательный контур, фильтр и т.д.)
- Ингаляционная седация в реанимации
Совместимость с системой [AnaConDa®](#)



ELISA 800 VIT

Elisa 800 VIT – первый аппарат ИВЛ с интегрированным модулем Электро-Импедансной Томографии (EIT).

Отображение на экране в режиме реального времени вентилятор-ассоциированных осложнений, позволяет оптимизировать параметры вентиляции под визуальным контролем.

