

Серия HyPort

Блок для подачи медицинского оборудования

Материалы и информация, содержащиеся в этой брошюре, распространяются в различных государствах, но не все указанные здесь изделия или услуги обязательно доступны в вашей стране или регионе. За справками о наличии соответствующих изделий или услуг обращайтесь в местные офисы или к представителям компании.



Серия HyPort

Блок для подачи медицинского оборудования



ДИСТРИБЬЮТОР:



MINDRAY является товарным знаком, зарегистрированным или иным образом защищенным, компании Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. в Китае и других странах.
HyPort является товарным знаком, зарегистрированным или иным образом защищенным, компании Nanjing Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. в Китае и других странах.
© 2011 Nanjing Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Все права защищены.
№ по каталогу: PУC-HyPort-210285x8-20110406



Развитие медицинских технологий привело к оснащению операционных и отделений интенсивной терапии мощными устройствами. Чтобы извлечь из них максимум ради повышения эффективности рабочего процесса и, в конечном счете, принести пользу пациентам, профессионалы нуждаются в решении, которое может оптимально организовать все устройства.

Подвес для подачи медицинского оборудования серии HyPort улучшает доступ к пациенту, повышает клиническую эффективность и обслуживание пациента, поднимая оборудование над полом, объединяя его выходы и размещая его в нужных местах. Модульная конструкция обеспечивает максимальную гибкость в различных пространствах, эргономичный дизайн требует от медсестер меньше усилий для быстрого и точного позиционирования, а цветовая гамма позволяет поддерживать гармоничную медицинскую обстановку, как для медработников, так и для пациентов.

- **Максимальная гибкость**
- **Великолепные рабочие характеристики**
- **Высшее качество**
- **Заказной дизайн**

HyPort 9000

Подвес для подачи медицинского оборудования



Поворачивающаяся на 340° колонна и электропневматическая * система тормозов в каждом шарнире во избежание смещений (*электропневматика поставляется по отдельному заказу)

Блок с электродвигателем для вертикального подъема может быстро поднимать наркозный аппарат или тележку для MIS до 400 мм. Грузоподъемность блока — 300 кг.

HyPort 9000 — это моторизованный подвес с механизмом вертикального подъема, оснащенный механическими руками.

Распределитель оснащен электродвигателем, который позволяет регулировать высоту блока для подъема наркозного аппарата или тележки для минимально инвазивной хирургии (MIS) над полом. Грузоподъемность — 300 кг.



Модуль управления подъемом 1: проводной пульт ручного управления



Модуль управления подъемом 2: кнопка управления на панели распределителя



Модуль управления подъемом 3: кнопка управления на рукоятке



Подъемная система, разработанная специально для MIS, обеспечивает достаточное освещение для медсестер и видимость ЖК-дисплея для хирурга.



Блоки для подачи медицинского оборудования HyPort улучшают обслуживание пациентов и оптимизируют рабочую процедуру для пользователей

Максимальная гибкость

- Благодаря тщательному учету клинических требований, подвесы для подачи медицинского оборудования HyPort могут изготавливаться по заказу не только для использования в ОИТ, но и подходят для обеспечения анестезии, хирургии и минимально инвазивной хирургии в операционной.
- Модульная конструкция позволяет располагать различное оборудование вокруг пациента в нужных местах.
- Поскольку механические руки различной длины — 500, 750, 1 000 и 1 250 мм — свободно сочетаются в одинарных и двойных конфигурациях, зона досягаемости меняется в диапазоне от 500 до 2 500 мм.
- Большое количество принадлежностей обеспечивает максимальную гибкость позиционирования в распределителях.

Великолепные рабочие характеристики

- Короткие кабели и трубки благодаря встроенным газовым/электрическим выходам внутри колонны/головки.
- Дизайн с гладкой поверхностью и округлой формой гарантирует высокий уровень гигиены и безопасности.
- Все механические руки, колонны и головки поворачиваются на 340° и имеют сверхтонкие настройки остановки.
- Быстрое и точное позиционирование без всяких усилий.

Высочайшее качество

- Механические руки/балки изготовлены из высококачественного алюминиевого сплава, облегчающего движение и обеспечивающего высокую прочность.
- Перед отгрузкой каждая установка, особенно выход газа, подвергается тщательной процедуре контроля качества.
- Конструкция подвеса обладает четырехкратным запасом прочности, проверенным в испытаниях.


Серия NuPort

Блок для подачи медицинского оборудования



Заказной дизайн

- Благодаря индивидуально подобранным длинам механических рук, NuPort вписывается в операционную или ОИТ любого размера и обеспечивает эффективное распоряжение пространством и оборудованием.
- Широкий выбор принадлежностей поддерживает различные медицинские приложения.
- AUTOCAD и трехкоординатное проектирование обеспечивают оптимальные конфигурации для клиентов.

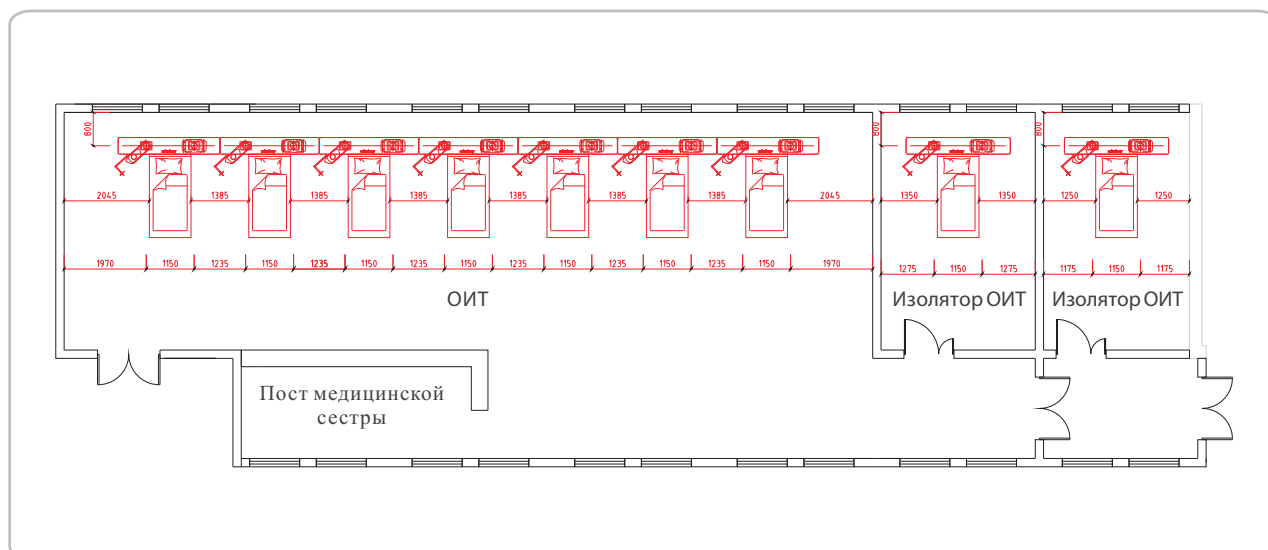

Технические данные

HyPort 9000

Длина руки Максимальная грузоподъемность Тип руки	Одинарная рука				Двойная рука						
	500 мм	750 мм	1 000 мм	1 250 мм	500+500 мм (1 000 мм)	750+500 мм (1 250 мм)	750+750 мм (1 500 мм)	1 000+750 мм (1 750 мм)	1 000+1 000 мм (2 000 мм)	1 250+1 000 мм (2 250 мм)	1 250+1 250 мм (2 500 мм)
Механическая рука малой грузоподъемности	300 кг	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Механическая рука средней грузоподъемности	460 кг	400 кг	320 кг	—	270 кг	—	—	—	—	—	—
Механическая рука большой грузоподъемности	680 кг	550 кг	420 кг	340 кг	400 кг	380 кг	350 кг	310 кг	270 кг	240 кг	210 кг

Тип распределителя	Версия колонны	
Длина распределителя	500 мм	800 мм
Размер полки	450×500 мм	

Длины всех механических рук и балок могут быть подобраны согласно техническим условиям заказчика.

Система обеспечения качества Nanjing Mindray сертифицирована согласно:
ISO 13485:2003, ISO 9001:2008
Директивы ЕС 93/42/EEC (Медицинские устройства)

Комплексные решения для операционной от компании — добро пожаловать в выставочный зал компании Mindray!

Все передовые и надежные средства на основе технологии компании Mindray прекрасно сочетаются друг с другом, обеспечивая полную поддержку!

