

Серия HyPort

Блок для подачи медицинского оборудования

Материалы и информация, содержащиеся в этой брошюре, распространяются в различных государствах, но не все указанные здесь изделия или услуги обязательно доступны в вашей стране или регионе. За справками о наличии соответствующих изделий или услуг обращайтесь в местные офисы или к представителям компании.



mindray

ДИСТРИБЬЮТОР:



MINDRAY является товарным знаком, зарегистрированным или иным образом защищенным, компании Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. в Китае и других странах.
HyPort является товарным знаком, зарегистрированным или иным образом защищенным, компании Nanjing Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. в Китае и других странах.
© 2011 Nanjing Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Все права защищены.
№ по каталогу: PУC-HyPort-210285x8-20110406



Серия HyPort

Блок для подачи медицинского оборудования

mindray

healthcare within reach



Развитие медицинских технологий привело к оснащению операционных и отделений интенсивной терапии мощными устройствами. Чтобы извлечь из них максимум ради повышения эффективности рабочего процесса и, в конечном счете, принести пользу пациентам, профессионалы нуждаются в решении, которое может оптимально организовать все устройства.

Подвес для подачи медицинского оборудования серии HyPort улучшает доступ к пациенту, повышает клиническую эффективность и обслуживание пациента, поднимая оборудование над полом, объединяя его выходы и размещая его в нужных местах. Модульная конструкция обеспечивает максимальную гибкость в различных пространствах, эргономичный дизайн требует от медсестер меньше усилий для быстрого и точного позиционирования, а цветовая гамма позволяет поддерживать гармоничную медицинскую обстановку, как для медработников, так и для пациентов.

- **Максимальная гибкость**
- **Великолепные рабочие характеристики**
- **Высшее качество**
- **Заказной дизайн**

HyPort 8000-I

Балка для медицинского оборудования



Вращающаяся рама с прочной тормозной кнопкой. Для удобства можно отрегулировать вертикальное положение полки грузоподъемностью 80 кг.



Ручная кнопка тормоза



Эргономичный и гигиеничный дизайн

HyPort 8000-I — это простой вариант балки для медицинского оборудования в отделении интенсивной терапии.

Балка HyPort 8000-I оснащена двумя челночными тележками, как для влажной, так и для сухой стороны, на которые можно устанавливать стойку для оборудования и крепить к ней стойку для вливания, полку или выдвижной ящик. Возможен доступ к газовым и электрическим выходам в балке.

Заказные решения для ОИТ

- Длина балки может достигать 3 500 мм и подбираться для различных клинических приложений.
- Комбинация из двух или более балок охватывает фактически неограниченное пространство.
- Полезная грузоподъемность сухой стороны — 130 кг, влажной стороны — 60 кг и полки — 80 кг.



Простое управление и позиционирование



Для клиентов по всему миру имеется полный спектр электрических и газовых выходов



Поворотный шкаф с выдвижными ящиками служит платформой для медсестер на влажной стороне



Кабельный органайзер, монтируемый на стойке, поддерживает порядок в ходе ежедневного рабочего процесса



Цветовая гамма способствует восстановлению пациента и гармонирует с общей медицинской обстановкой

HyPort 8000-II

Балка для медицинского оборудования



HyPort 8000-II — это высококлассный вариант балки для медицинского оборудования в отделении интенсивной терапии.

Балка HyPort 8000-II оснащена двумя челночными тележками, как для влажной, так и для сухой стороны, на которые можно устанавливать распределительную колонну или распределительную головку и крепить к ней стойку для вливания, полку или выдвижной ящик. Возможен доступ к газовым и электрическим выходам в распределителе, который расположен ближе к оборудованию, чем балка. В то же время, на балке можно расположить дополнительные выходы.



Распределитель сближает газовые и электрические выходы с оборудованием. Каждый шарнир может быть оборудован пневматическим тормозом, предотвращающим непроизвольное движение.



Вариант распределителя в виде головки приближает выходы к оборудованию и, в то же время, экономит пространство.



Рычаг монитора с переходником VESA



Балка HyPort 8000-II в полной мере отвечает потребностям ОИТ

- Доступ со всех сторон гарантирует тщательный уход за пациентом
- Маневренное перемещение распределителей создает дополнительные удобства для медработников
- Прямое и отраженное освещение подходит для чтения и повышает качество сна
- Эргономичный дизайн и улучшенные гигиена и безопасность




Серия HyPort

Блок для подачи медицинского оборудования



Заказной дизайн

- Благодаря индивидуально подобранным длинам механических рук, HyPort вписывается в операционную или ОИТ любого размера и обеспечивает эффективное распоряжение пространством и оборудованием.
- Широкий выбор принадлежностей поддерживает различные медицинские приложения.
- AUTOCAD и трехкоординатное проектирование обеспечивают оптимальные конфигурации для клиентов.

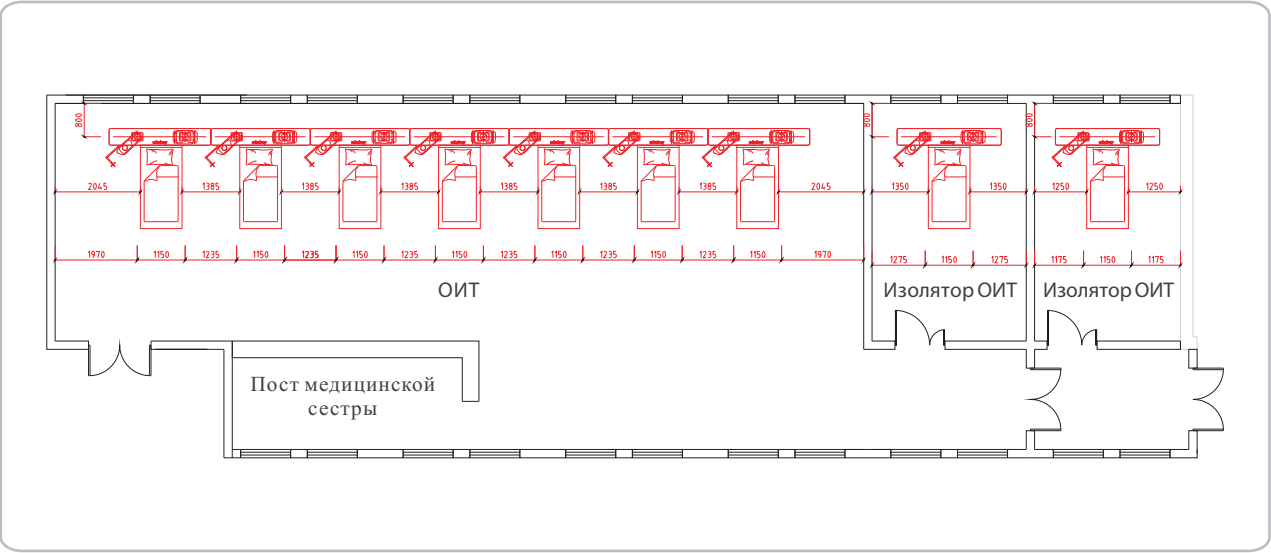

Технические данные

HyPort 8000-I

Грузоподъемность подвесных колонн	Длина балки (мм)	Ширина балки	Толщина балки	Диапазон поворота сухой стороны	Грузоподъемность влажной стороны	Грузоподъемность сухой стороны	Размер полки		
250 кг	2 200 мм, 2 500 мм, 2 800 мм, 3 100 мм, 3 500 мм	560 мм	215 мм	340°	60 кг	130 кг	450×350 мм	550×350 мм	650×350 мм

HyPort 8000-II

Грузоподъемность подвесных колонн	Длина балки (мм)	Ширина балки	Толщина балки	Диапазон поворота сухой стороны	Грузоподъемность челюночной тележки колонны	Грузоподъемность челюночной тележки головки
250 кг	2 200 мм, 2 500 мм, 2 800 мм, 3 100 мм, 3 500 мм	560 мм	215 мм	340°	120 кг	100 кг

Тип челюночной тележки	Версия головки		Версия колонны			
Длина распределителя	600 мм	700 мм	500 мм	800 мм	1 000 мм	1 250 мм
Размер полки	450×350 мм	550×350 мм, 650×350 мм	450×500 мм			

Комплексные решения для операционной от компании — добро пожаловать в выставочный зал компании Mindray!

Все передовые и надежные средства на основе технологии компании Mindray прекрасно сочетаются друг с другом, обеспечивая полную поддержку!

